



ABSOLUTE

ZAŘÍZENÍ NA DOMÁCÍ LASEROVÉ ODSTRAŇOVÁNÍ
CHLOUPKŮ, PRVNÍ SVÉHO DRUHU NA SVĚTĚ

Zařízení Absolute na odstraňování chloupků pro domácí použití



NÁVOD K POUŽITÍ



Model EP-720-08

TABULKA BEZPEČNOSTI – ZKONTROLUJTE, ZDA MŮŽETE TOTO ZAŘÍZENÍ BEZPEČNĚ POUŽÍVAT	1
KDE TOTO ZAŘÍZENÍ MŮŽETE POUŽÍVAT A KDE NIKOLIV	2
ÚVOD K ZAŘÍZENÍ ABSOLUTE NA ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOUPKŮ	3
Gratulujeme k vašemu novému zařízení Absolute!	3
Jak zařízení Absolute na odstraňování chloupků funguje?	3
Jak dlouhý by měl chloupek být?	4
Jaký je to pocit, když laseruji chloupek?	4
Jak dlouho mám ošetřovat oblast (oblasti), které chci laserovat?	4
Před použitím si přečtěte tyto pokyny	4
Bezpečnostní vlastnosti zařízení Absolute pro zajištění bezpečného používání	5
VÝSTRAHY	6
SEZNÁMENÍ SE SE ZAŘÍZENÍM ABSOLUTE	8

PŘEHLED OŠETŘENÍ POMOCÍ ZAŘÍZENÍ ABSOLUTE	9
Před prvním ošetřením	9
Mezi ošetřeními	9
Během prvních 3 měsíců	9
Po 3 měsících	9
NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ	10
Nabíjení zařízení	10
POKYNY K OŠETŘENÍ POMOCÍ ZAŘÍZENÍ ABSOLUTE	11
PÉČE O ZAŘÍZENÍ ABSOLUTE	15
Čištění zařízení	15
Dobijte každé 3 měsíce v případě dlouhodobého skladování	16
Recyklace/likvidace	16
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	17
OMEZENÁ ZÁRUKA	19
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	21
DENÍK OŠETŘOVÁNÍ	22

ZKONTROLUJTE ODSTÍN SVÉ POKOŽKY

Přiřadte odstín pokožky oblasti (oblastí), kterou chcete ošetřit, k níže uvedeným odstínům pokožky, abyste určili, jestli toto zařízení můžete bezpečně používat. Zařízení Absolute je určeno k použití pouze pro odstíny pokožky typu I (bílá) až typu IV (světle hnědá)

					
Typ I (Bílá)	Typ II (Slonovinová)	Typ III (Béžová)	Typ IV (Světle hnědá)	Typ V (Středně hnědá)	Typ VI (Tmavě hnědá / černá)
✓	✓	✓	✓	✗	✗

✗ **NENÍ BEZPEČNĚ** ✗

DŮLEŽITÉ:

NEPOUŽÍVEJTE zařízení, jestliže odstín pokožky ošetřované oblasti odpovídá typu V (středně hnědá) nebo typu VI (tmavě hnědá / černá). Tmavá pokožka může absorbovat příliš mnoho laserového světla, což může pokožku poškodit.

ZKONTROLUJTE BARVU SVÝCH CHLOUPKŮ:

Zařízení Absolute funguje nejlépe na přirozeně tmavých chloupkách (černé, tmavé, hnědé, středně hnědé nebo světle hnědé). Zařízení Absolute bude působit, ale nebude účinné, na bílé, šedé, blondaté nebo rusé chloupky na těle.

							
Černá	Tmavě hnědá	Středně hnědá	Světle hnědá	Bílá	Šedá	Blondatá	Rusá
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

KDE TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT

Zařízení Absolute lze používat na následujících částech těla:

- ✓ Chloupky na obličeji (na tvářích a pod nimi)
- ✓ Podpaží
- ✓ Ruce a chodidla
- ✓ Paže a nohy*
- ✓ Záda*

POZNÁMKA: Zařízení Absolute funguje nejlépe na malých oblastech růstu chloupků (např. na obličeji).

Jestliže se používá na větší oblast (např. nohy), je doba ošetření delší.

KDE TOTO ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVAT

Použití zařízení Absolute není bezpečné na následujících částech těla:

- ✗ Oblasti očí (oči, obočí a řasy)
- ✗ Uši
- ✗ Bradavky
- ✗ Genitálie
- ✗ Řitní otvor

GRATULUJEME K VAŠEMU NOVÉMU ZAŘÍZENÍ ABSOLUTE!

Zařízení Absolute vám poskytne dlouhotrvající výsledky odstraňování chloupků při domácím použití na rozdíl od dočasných řešení, jako je holení a voskování. Zařízení Absolute funguje stejně jako profesionální laserové odstraňování chloupků. Ošetřuje folikul chloupku, nejen chloupek, a po sérii ošetření jsou chloupky trvale odstraněny.

JAK ZAŘÍZENÍ ABSOLUTE NA ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOUPKŮ FUNGUJE?

Zařízení Absolute vysílá impuls laserového světla, který zahřívá tmavý pigment uvnitř chloupku a deaktivuje folikul produkující chloupek. To je důvod, proč zařízení Absolute poskytuje trvalé výsledky, a proč funguje pouze na přirozeně tmavé chloupky (černé, tmavě hnědé, středně hnědé nebo světle hnědé). Pro co největší účinnost zařízení Absolute je třeba, aby byl každý folikul chloupku ošetřen během období jeho aktivního růstu. Chloupky rostou v cyklech, takže je potřeba více ošetření.

Hlavní výhodou zařízení Absolute je, že má velikost paprsku pouze 1 mm² (0,04 palce²), takže ošetřuje pouze oblast v bezprostřední blízkosti folikulu chloupku. Tím se zabrání vystavení velkých oblastí pokožky zbytečnému laserovému světlu, což vám umožní zaměřit úsilí skutečně na chloupky a ne na okolní pokožku.

Vestavěný reflektor osvětluje oblast pokožky a umožňuje vám vybrat si jednotlivé chloupky, které chcete ošetřit. Ošetření je snadné a pohodlné, protože jen umístíte zařízení Absolute na pokožku, a nejlepší ze všeho je, že svou pokožku můžete ošetřit v pohodlí svého domova, kdykoli budete chtít.

JAK DLOUHÝ BY MĚL CHLOUPEK BÝT?

Chloupky musí být v době ošetření viditelné (krátké jako strniště až do 2 mm (0,08 palce)). Neošetřujte chloupky delší než 2 mm (0,08 palce). Jakýkoli příliš dlouhý nebo hustý chloupky se spálí.

JAKÝ JE TO POCIT, KDYŽ LASERUJI CHLOUPEK?

Pocit se liší v závislosti na osobě a oblasti ošetření. Možná necítíte nic nebo můžete zažít pocit tepla, píchání. U některých uživatelů se může objevit mírné zarudnutí, které obvykle zmizí během 24 hodin.

JAK DLOUHO MÁM OŠETŘOVAT OBLAST (OBLASTI), KTERÉ CHCI LASEROVAT?

Pro dosažení nejlepších výsledků je ošetřujte každé 3–4 dny, nebo když chloupky začnou být znovu viditelné.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY

Doporučujeme, abyste si tyto pokyny uložili pro budoucí použití. Než začnete používat své nové zařízení Absolute, přečtěte si tento návod k použití:

- Zjistíte, zda je použití zařízení Absolute pro Vás bezpečné (viz strana 1).
- Naučíte se, jak správně používat zařízení Absolute (viz strany 17–21).
- Můžete si přečíst kontraindikace (viz strana 8) a výstrahy a bezpečnostní informace (viz strany 9–10).
- Tento výstražný symbol  se zobrazí vedle informací o možných bezpečnostních rizicích.
- Přečtěte si naše tipy pro nejlepší výsledky ošetření (viz strana 20).

BEZPEČNOSTNÍ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ ABSOLUTE

I Čidlo kontaktu s pokožkou – Ošetřovací okénko laseru musí být v plném kontaktu s pokožkou, aby laser fungoval. Když není v plném kontaktu s pokožkou, laser se deaktivuje.

⚠ NEPOUŽÍVEJTE zařízení Absolute na následující oblasti těla:

- Na oči, obočí nebo řasy nebo na jejich okolí. To může způsobit trvalé poškození oka.
- Kdekoli kolem čela, spánků, nosních dírek, uší, bradavek, genitálií nebo na nich nebo v oblasti řitního otvoru.
- Tyto oblasti mohou mít citlivější pokožku, tmavší odstín a/nebo větší hustotu chloupků a použití zařízení Absolute v těchto oblastech může způsobit poškození pokožky.
- Na částech vaší pokožky, které jsou tmavší než váš obvyklý odstín pokožky: tetování, tmavě hnědé nebo černé skvrny (jako jsou velké pihy, mateřská znaménka nebo pigmentové skvrny), opálená pokožka nebo pokožka, která je červená nebo oteklá. Tmavá pokožka může absorbovat příliš mnoho laserového světla, což může pokožku poškodit.
- Na poškozenou pokožku včetně otevřených ran, oparů, spálenin od slunce nebo na místech, kde jste během posledních 6–8 týdnů podstoupila peeling pokožky nebo jinou proceduru pro obnovu povrchu pokožky (zkontrolujte s lékařem). Tyto stavy mohou způsobit, že pokožka je náchylnější k poranění.
- Na jakékoli oblasti, kde si možná jednou budete chtít nechat narůst chloupky. Výsledky mohou být trvalé a nevratné.

⚠ NEPOUŽÍVEJTE zařízení Absolute, pokud Tabulka bezpečnosti odstínu pokožky ukazuje, že odstín vaší pokožky je označen jako „Není bezpečný“.

Jestliže jste afrického, indického, domorodého amerického nebo tichomořského původu, možná máte odstín pokožky, který není vhodný – nezapomeňte zkontrolovat Tabulku bezpečnosti odstínu pokožky na straně 1. Pokožka tmavších odstínů může absorbovat příliš mnoho laserového světla, což může pokožku poškodit.

 Laserové odstranění chloupků může u některých jedinců způsobit zvýšený růst chloupků. Na základě aktuálně dostupných údajů jsou skupiny s nejvyšším rizikem této reakce původem ze Středomoří, Středního východu a Jižní Asie a týká se ošetření na obličeji a krku.

 **NESMĚŘUJTE laser do očí.**
Laser by mohl způsobit trvalé a nevratné poškození.

 **NEPOUŽÍVEJTE zařízení Absolute pro jakýkoliv jiný účel než odstranění chloupků.**

 **NEPOUŽÍVEJTE zařízení Absolute, pokud se zdá být poškozené. NEPOKOUŠEJTE se otevřít nebo opravit zařízení Absolute.**

Tyto činnosti zvyšují riziko poranění pokožky nebo očí. Pokud se zdá, že je vaše zařízení Absolute poškozeno, kontaktujte prosím zákaznickou podporu Epilady.

 Vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření pro elektrická zařízení:

- NEDOVOLTE, aby zařízení Absolute, kabel nebo napájecí adaptér navlhly nebo byly mokré.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení Absolute při koupání ani jej neumísťujte do blízkosti vany nebo umyvadla.
- NEPOUŽÍVEJTE napájecí adaptér s poškozenou zástrčkou nebo kabelem.
- VŽDY udržíte kabel mimo horké povrchy. Nedodržení těchto opatření může způsobit smrt nebo úraz elektrickým proudem.

 **NEUPUSŤTE zařízení Absolute ani žádné jeho součásti, protože by mohlo dojít k poškození zařízení.**

SEZNÁMENÍ SE SE ZAŘÍZENÍM ABSOLUTE

(A) Ošetřovací okénko: Konec zařízení, který musí být v kontaktu s pokožkou a oblastí, kterou chcete ošetřit. Když je laser zapnutý, bude z tohoto konce vycházet bílé světlo.

(B) Vypínač napájení: Stisknutím dolní části zapnete zařízení.

(C) Světlo indikátoru: Světlo ve spodní části laseru, které vás informuje o stavu laseru.

 Blikající červená = nabíjení

 Oranžová = nabíjení dokončeno

 Zelená = laser je zapnutý

(D) Kryt: Chrání zařízení, když se nepoužívá.

(E) Kabel nabíječky: tento kabel má 2 koncovky:

- Konektor USB – připojuje se k nabíječce kompatibilní s USB (např. nabíječka telefonu, počítač)
- Zástrčka s kolíkem – připojuje se k laseru



PŘED PRVNÍM OŠETŘENÍM

- Nepodstupujte peeling pokožky nebo jiný postup obnovení jejího povrchu šest týdnů nebo méně před prvním ošetřením.
- Plně nabijte zařízení.
- Nejméně 1 den před ošetřením proveďte 3 bodové testy v oblasti, kterou chcete ošetřit (viz strana 15).

BĚHEM PRVNÍCH 3 MĚSÍCŮ

- Po prvním ošetření nenastane na chloupkách žádná viditelná změna. Laserové odstranění nezpůsobí okamžité vypadnutí chloupků.
- Ošetřené chloupky nakonec samy vypadnou. Po ošetření můžete také odstranit ošetřené chloupky pinzetou.
- Při dalších ošetřeních se počet chloupků postupně snižuje. Chloupky, které znovu vyrostou, se také začnou zesvětlovat a budou jemnější.

PO PRVNÍCH 3 MĚSÍCÍCH

- Chloupky z folikul, které byly deaktivovány zařízením Absolute, už znovu nerostou.
- V případě potřeby proveďte příležitostné opravy nebo dodatečné ošetření.
- Pro dosažení nejlepších výsledků provádějte ošetření každý druhý týden po dobu 3 měsíců nebo dokud nebudete spokojeni s mírou odstranění chloupků


NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

Před prvním ošetřením a mezi ošetřeními zařízení nabijte.

1. Připojte koncovku kabelu nabíječky s kolíkem k zařízení.
2. Připojte druhou koncovku (USB) k nabíječce s USB.
3. Během nabíjení laseru indikátor na spodní části zařízení bliká červeně.
4. Nabíjení je dokončeno, když se kontrolka na spodní straně zařízení změní na oranžovou. Jakmile je zařízení nabito, odpojte kabel nabíječky. Po dokončení nabíjení jej nenechávejte v nabíječce, protože by se zkrátila životnost baterie.

POZNÁMKY K NABÍJENÍ:

- Zařízení se začne nabíjet, jakmile je připojeno k nabíječce.
- Pokud jste zařízení Absolute několik týdnů nepoužívali, nabijte jej. Pokud zařízení Absolute používáte často, nabíjejte jej podle potřeby.
- Abyste zabránili poškození zařízení Absolute, používejte pouze přiložený napájecí kabel a nabíječku s USB pro telefon. Pokud ztratíte napájecí kabel, kontaktujte zákaznickou podporu Epilady.

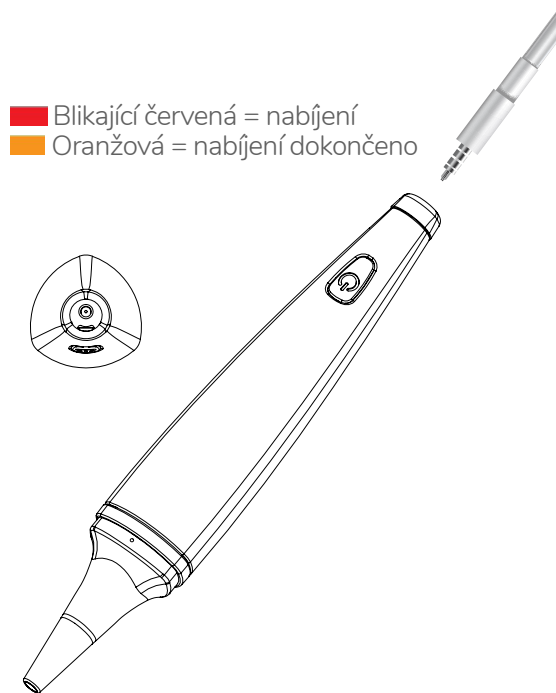

POZNÁMKA: Před každým ošetřením zkontrolujte nabití zařízení Absolute. Pokud zařízení zapnete a namísto zelené kontrolky svítí červená, připojte jej k nabíječce.

Připravte svou pokožku

1a: Očistěte oblast ošetření. Odstraňte veškerou kosmetiku, pleťové vody a krémy, které mohou blokovat laserové světlo.

1b: Osušte oblast ošetření.



Odstraňte kryt ze zařízení

Odstraňte ochranný kryt ze zařízení.



Zapněte zařízení

3a: Stiskněte vypínač napájení. Indikátor na spodní straně přístroje se změní na zelenou a vysílá zvukový signál, který vám sdělí, že zařízení bylo zapnuto.

3b: Jakmile je zařízení zapnuto, ošetřovací okénko vyzařuje bílý paprsek světla, abyste věděli, že zařízení Absolute je připraveno k použití. Nejedná se o laserový paprsek, ale pouze světlo, které vám umožní lépe vidět pokožku. Světlo se bude odrážet na pokožku, když k ošetřovacímu okénku přiblížíte ruku.

POZNÁMKA: Pokud se zařízení 2 minuty nepoužívá, automaticky se vypne.

Zaměření a ošetření chloupků

4a: Přitiskněte ošetřovací okénko zcela k pokožce v oblasti, kterou chcete ošetřit. Pokud čidlo odstínu pokožky stanoví, že pleť „Není bezpečná“, zařízení ošetření neposkytne.

4b: Po vytvoření dobrého kontaktu s pokožkou držte zařízení Absolute na místě po dobu dvou sekund. Automaticky poskytne laserové ošetření. Na zařízení netlačte, prostě jej držte na místě přitisknuté k pokožce.



Zaměření a ošetření chloupků

4c: Když laser ošetřuje oblast, zelený indikátor bliká. To můžete sledovat v zrcadle, které používáte.

4d: Pokud zařízení Absolute odstraníte příliš brzy, indikátor bude blikat červeně a zazní zvukový signál, který znamená, že ošetření nebylo aplikováno.

4e: Pokud se tak stane, jednoduše opět umístěte zařízení, přidržte jej na pokožce a počítejte do 2.

PAMATUJTE při ošetřování chloupku na následující:

- Laser vyšle pouze jeden impulz, poté je nutné jej zvednout z pokožky a přemístit. Laser nevyšle více než jeden impulz, pokud se nepřemístí z pokožky.
- Po ošetření bude chloupek na pokožce stále viditelný.

5. Přemístěte a opakujte u dalších chloupků

Po ošetření jednoho chloupku přemístěte ošetřovací okénko na další chloupek, který chcete ošetřit. Postupujte podle kroku 4 (viz strana 19) pro každý chloupek, který si přejete ošetřit.

POZNÁMKA: Laserové ošetření chloupků ošetřené chloupky okamžitě neodstraní. Zamýšleným výsledkem je, že vlasový folikul bude po ošetření deaktivován a nevyroste z něj nový chloupek.


6. Po dokončení ošetření zařízení Absolute vypněte

Stiskněte vypínač napájení v dolní části. Indikátor zhasne a zazní zvukový signál.



7. Odpojte kabel nabíječky

Pokud jste z nějakého důvodu měli zařízení Absolute připojené k nabíječce během používání (což byste neměli), odpojte kabel a uskladněte jej spolu se zařízením.

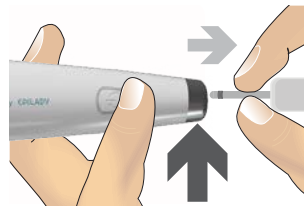

8. Znovu nasadte kryt

Nasadte kryt zpět na konec zařízení přes ošetrovací okénko.



Zařízení Absolute nevyžaduje zvláštní péči, ale doporučujeme, abyste jej udržovali v čistotě, zejména oblast ošetřovacího okénka.

Čištění zařízení

1. VYPNĚTE zařízení Absolute a odpojte napájecí adaptér od zařízení a elektrické zásuvky.
2. Čistěte zařízení jemným otřením alkoholovým ubrouskem.
 - Zaměřte se na oblasti, které se dotkly vaší pokožky, zejména kolem ošetřovacího okénka.
 - Dávejte pozor, abyste nepoškodili vnitřek ošetřovacího okénka.

 **NEČISTĚTE žádnou část soupravy Absolute mýdlem a vodou.**

 **NEVKLÁDEJTE nic do otvoru ošetřovacího okénka nebo do jiné části laseru.**

 **Zařízení Absolute ani napájecí adaptér a kabel NESMÍ být vlhké nebo mokré.**
Zařízení Absolute ani napájecí adaptér a kabel nepoužívejte, pokud jsou mokré. Ošetření mokrým zařízením Absolute (nebo jeho součástí) může způsobit smrt nebo úraz elektrickým proudem. Pokud se některá ze součástí náhodně namočí, nechte ji důkladně vyschnout, než ji budete znovu používat.

Dobíjejte zařízení každé 3 měsíce v případě dlouhodobého skladování

Pokud neplánujete používat své zařízení Absolute po dlouhou dobu, doporučujeme vám dobít jej každé 3 měsíce, abyste zachovali životnost baterie. Postup nabíjení viz pokyny pro nabíjení v této příručce.

Recyklace/likvidace

Zařízení Absolute obsahuje tři lasery, složité obvody a dobíjecí baterie. Chcete-li tyto součásti recyklovat nebo zlikvidovat, postupujte podle místních předpisů nebo se obraťte na zákaznickou podporu Epilady.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na zákaznickou podporu Epilady.

Váš problém	Je možné, že...	Co byste měli udělat
Zařízení Absolute se nezapne.	Vaše zařízení Absolute není nabito.	Nabijte zařízení (viz strana 16).
Když nabívám zařízení Absolute, indikátor baterie se nerozsvítí.	Vaše zařízení Absolute není správně připojeno.	Ujistěte se, že ● Používáte kabel dodaný se sadou zařízení Absolute. ● Adaptér je připojen do nástěnné zásuvky, která funguje.
Indikátor baterie stále bliká červeně i po nabití zařízení Absolute	Vaše zařízení Absolute není plně nabito.	Nabijte zařízení Absolute (viz strana 16).
Zařízení Absolute fungovalo správně, ale pak přestalo fungovat. Zařízení je vypnuté a nelze jej znovu zapnout.	Je třeba nabít baterii.	Nabijte zařízení Absolute (viz strana 16).

Váš problém	Je možné, že...	Co byste měli udělat
Všechno je uděláno správně, ale laser nevysílá impulz.	Laser nebyl zapnut.	Stiskněte vypínač napájení, abyste zařízení zapnuli. Indikátor se rozsvítí zeleně.
	Čidlo odstínu pokožky zjistilo odstín pokožky, který je označen jako „Není bezpečný“.	Odstín pokožky v ošetřované oblasti je příliš tmavý na to, aby byl vhodný pro laserové ošetření.
	Ošetřovací okénko není zcela v kontaktu s pokožkou.	Ujistěte se, že ošetřovací okénko je na pokožce zcela naplocho (viz strany 18–19).

Omezení záruky a vyloučení odpovědnosti

Společnost Epilady, Inc. vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že její produkty jsou vyráběny bez jakýchkoliv závad. Nicméně v případě ojedinělé závady způsobené vadným zpracováním nebo materiálem garantujeme bezplatnou opravu nebo výměnu produktu nebo jakékoli jeho části.

- Tato záruka je poskytována pouze původnímu kupujícímu a je platná jeden rok od data nákupu. Pro záruční servis je nutné předložit doklad o koupi.
- Tato záruka se neprodlužuje na žádné období, během kterého je zařízení Absolute (nebo jakákoli jeho část) v opravě nebo pokud je vaše zařízení Absolute vyměněno společností Epilady během záruční doby.
- Tato záruka platí pouze pro produkty zakoupené u autorizovaných prodejců nebo přímo od společnosti Epilady.
- Tato záruka neplatí, pokud byl výrobek pozměněn, opraven nebo s ním bylo jinak neoprávněně manipulováno. Tato záruka neplatí, pokud je výrobek používán jinak než v souladu s pokyny výrobce. Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které uživatel upustil nebo jinak poškodil.

Servis

Pokud potřebujete servis, NEVRACEJTE svůj produkt prodejci.

Pokud vaše zařízení Absolute potřebuje servis před uplynutím jednorroční záruční doby, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Epilady. Vydáme vám číslo RA (Return Authorization – povolení k vrácení), abyste zařízení Absolute poslali na opravu/výměnu.

NEPOSÍLEJTE své zařízení Absolute, aniž byste nejprve získali číslo RA. Nebude na něm proveden servis a může se ztratit.

Pokud zjistíme závadu, na kterou se vztahuje záruka, naše servisní oddělení určí příčinu problému a podle toho opraví/vymění váš produkt.

Pokud zjistíme, že na závadu vašeho zařízení Absolute se tato omezená záruka nevztahuje, budeme vás informovat o možnostech provedení servisu za poplatek.

Pokud zjistíme, že vaše zařízení Absolute není vadné, upozorníme vás na to a vaše zařízení Absolute vám vrátíme.

Veškeré služby omezené záruky musí schválit a provést společnost Epilady, Inc.

Typ laseru: Diodový laser

Třída laseru: 1C

Výstupní vlnová délka: 808 +/- 20 % nm

Plynulost výstupu: 24 J/cm²

Vstup napájecího adaptéru: 100–240 V, 50–60 Hz, 0,5 A

Výstup napájecího adaptéru: 5,0 V DC, 2,0 A

Očekávaná životnost baterie: Až 1 000 nabití

DENÍK OŠETŘOVÁNÍ

Použijte níže uvedenou tabulku, abyste mohli sledovat svá ošetření pomocí zařízení Absolute.

Datum	Oblast ošetření	Počet impulzů

DENÍK OŠETŘOVÁNÍ

Použijte níže uvedenou tabulku, abyste mohli sledovat svá ošetření pomocí zařízení Absolute.

Datum	Oblast ošetření	Počet impulzů

DENÍK OŠETŘOVÁNÍ

Použijte níže uvedenou tabulku, abyste mohli sledovat svá ošetření pomocí zařízení Absolute.

Datum	Oblast ošetření	Počet impulzů

DENÍK OŠETŘOVÁNÍ

Použijte níže uvedenou tabulku, abyste mohli sledovat svá ošetření pomocí zařízení Absolute.

Datum	Oblast ošetření	Počet impulzů



ABSOLUTE

ZAŘÍZENÍ NA DOMÁCÍ LASEROVÉ ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOUPKŮ,
PRVNÍ SVÉHO DRUHU NA SVĚTĚ





ABSOLUTE



ABSOLUTE



NÁVOD K POUŽITÍ