



EPILASER

od EPILADY

**UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA**

Č. 808

Model EP-720-10

OBSAH

URČENÉ POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ EPILASER (INDIKACE)	2
KDO BY NEMĚL POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ EPILASER (KONTRAINDIKACE)	2
Výstrahy.....	3
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	5
KAPITOLA 1 UVÍTÁNÍ	6
1-1 Úvod.....	6
1-2 CHARAKTERISTIKY	7
1-3 OBSAH BALENÍ.....	8
KAPITOLA 2: Základní informace.....	9
2-1 Tlačítka a součásti.....	9
2-2 Nabíjení zařízení Epilaser.....	9
2-3 Zapnutí/vypnutí	11
KAPITOLA 3: Příprava	12
3-1 Příprava.....	12
3-1-1. Zkontrolujte odstín vaší pokožky a přirozenou barvu vašich chloupků.....	12
3-1-2 Připravte svou pokožku	13
3-1-3 Test bodů	14
3-2 Ošetření vašich chloupků	14
KAPITOLA 4: PO OŠETŘENÍ.....	17
4-1 Čištění zařízení Epilaser.....	17
4-2 Tipy pro uživatele.....	18
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	19
Specifikace	20

DŮLEŽITÉ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tuto příručku. Uživatelé jsou povinni se před použitím tohoto zařízení seznámit se všemi bezpečnostními informacemi a pokyny. Tento návod by měl být uschován pro budoucí použití.

URČENÉ POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ EPILASER (INDIKACE)

Zařízení Epilaser je volně prodejný systém odstraňování chloupků určený k použití ve spojení s holením. Zařízení Epilaser je také určeno k trvalému snížení opětovného růstu chloupků, tj. dlouhodobému, stabilnímu snížení počtu chloupků po ošetření. Trvalé snížení počtu chloupků je definováno jako dlouhodobé, stabilní snížení počtu chloupků, které dorůstají, při srovnání růstu chloupků po 6, 9 a 12 měsících.

Zařízení Epilaser je určeno k použití pouze na odstíny pokožky typu I (bílá) až typu IV (světle hnědá) s různými přirozenými barvami chloupků (viz „Zkontrolujte odstín vaší pokožky a přirozenou barvu vašich chloupků“ na stranách 12, 13).

KDO BY NEMĚL POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ EPILASER (KONTRAINDIKACE)

Neslučitelné odstíny pokožky: Typ V a typ VI



NEPOUŽÍVEJTE zařízení Epilaser jestliže se odstín vaší pokožky shoduje s tónem uvedeným v tabulce odstínů pokožky jako „Neslučitelný“. (viz „Zkontrolujte odstín vaší pokožky a přirozenou barvu vašich chloupků“ na stranách 12, 13). Pokud použijete zařízení Epilaser na středně hnědé, tmavě hnědé nebo černé odstíny pokožky, které jsou všechny označené jako „Neslučitelné“, může pokožka absorbovat příliš mnoho laserového světla, což způsobí popáleniny, změnu barvy nebo jizvy.

NEPOUŽÍVEJTE zařízení Epilaser, pokud je vám méně než 18 let. Nepoužívejte zařízení Epilaser na sobě ani na nikom jiném, komu je méně než 18 let. Použití zařízení Epilaser u vás nebo u osob mladších 18 let není ověřeno a mohlo by vést k vážnému zranění.

Výstrahy

1. NEPOUŽÍVEJTE zařízení Epilaser na následující oblasti těla:

- Na oči, obočí nebo řasy nebo na jejich okolí. To může způsobit trvalé poškození oka. Kdekoliiv kolem čela, spánků, nosních dírek, uší, bradavek, genitálií, pupku nebo na nich nebo v oblasti řitního otvoru. Tyto oblasti mohou mít citlivější pokožku a/nebo větší hustotu chloupků a použití zařízení EPILASER v těchto oblastech může způsobit poškození pokožky.
- Na poškozenou pokožku včetně otevřených ran, oparů, spálenin od slunce nebo na místech, kde jste během posledních 6–8 týdnů podstoupila peeling pokožky nebo jinou proceduru pro obnovu povrchu pokožky (zkontrolujte s lékařem). Tyto stavy mohou způsobit, že pokožka je náchylnější k poranění.
- Na jakékoli oblasti, kde si možná jednou budete chtít nechat narůst chloupky. Výsledky mohou být trvalé a nevratné.

2. NEPOUŽÍVEJTE zařízení Epilaser, jestliže je odstín vaší pokožky určen jako „Neslučitelný“. (Viz „Zkontrolujte odstín vaší pokožky a přirozenou barvu vašich chloupků“ na stranách 12, 13).

3. Laserové odstranění chloupků může u některých jedinců způsobit zvýšený růst chloupků. Na základě aktuálně dostupných údajů jsou skupinou s největším rizikem této odezvy této reakce ženy původem ze Středomoří, Středního východu a Jižní Asie a týká se ošetření na obličeji a krku.

4. NEPOUŽÍVEJTE zařízení Epilaser, jestliže jste těhotná nebo kojíte.

- Zařízení Epilaser nebylo podrobeno zkouškám na těhotných ženách. Hormonální změny mohou zvýšit citlivost pokožky a riziko jejího poranění.

5. NESMĚŘUJTE laser do očí.

- Laser by mohl způsobit trvalé a nevratné poškození.

6. NEPOUŽÍVEJTE zařízení Epilaser pro jakýkoliv jiný účel než odstranění chloupků.

7. NEPOUŽÍVEJTE zařízení Epilaser, pokud se zdá být poškozené. **NEPOKOUŠEJTE se otevřít nebo opravit zařízení Epilaser.**

Tyto činnosti zvyšují riziko poranění pokožky nebo očí. Kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Epilady 2000 LLC, pokud se zdá, že je vaše zařízení Epilaser poškozeno.

8. Vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření pro elektrická zařízení:

- NEDOVOLTE, aby zařízení Epilaser, kabel nebo napájecí adaptér navlhly nebo byly mokré.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení Epilaser při koupání ani jej neumísťte do blízkosti vany nebo umyvadla.
- NEPOUŽÍVEJTE napájecí adaptér s poškozenou zástrčkou nebo kabelem.
- VŽDY udržujte kabel mimo horké povrchy. Nedodržení těchto opatření může způsobit smrt nebo úraz elektrickým proudem.

9. NEUPUŠŤTE zařízení Epilaser ani žádné jeho součásti, protože by mohlo dojít k poškození zařízení.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Relativní vlhkost: 25 ~ 80 %, teplota skladování: -20 až 60 °C (-4 až 140 °F), provozní teplota: 0 ~ 50 °C (32 až 122 °F).
2. NEVKLÁDEJTE nic do otvoru ošetrovacího okénka nebo do jiné části laseru.
3. NENAMÁČEJTE zařízení Epilaser a/nebo nabíjecí kabel. Zařízení Epilaser ani nabíjecí kabel nepoužívejte, pokud jsou mokré. Ošetření mokrým zařízením Epilaser (nebo jeho součástí) může způsobit smrt nebo úraz elektrickým proudem. Jestliže se některá součást náhodou namočí, před dalším pokusem ji důkladně vysušte.
4. Používejte pouze originální nebo certifikované kabely. NEPOUŽÍVEJTE nabíjecí adaptér s poškozenou zástrčkou nebo kabelem.
5. Následkem upuštění zařízení Epilaser nebo jakékoliv jeho součásti může dojít k jeho poškození.
6. Ideální skladovací teplota činí 0 až 35 °C (32 až 95 °F).
7. Uchovávejte zařízení mimo dosah nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň a podobně. Stejně tak jej chraňte před mimořádně nízkými teplotami.
8. Nepoužívejte zařízení venku během bouřky.
9. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení.
10. Abyste předešli poškození součástí nebo vnitřních obvodů vašeho zařízení, nepoužívejte jej v prašném, zakouřeném, vlhkém nebo špinavém prostředí.
11. Zařízení nepoužívejte, neskladujte ani nepřpravujte v blízkosti výbušnin nebo hořlavých předmětů. Používání zařízení v těchto prostředích zvyšuje riziko výbuchu nebo požáru.
12. Čistěte zařízení jemným otřením alkoholovým ubrouskem; nepoužívejte k čištění vodu ani žádné korozivní čisticí prostředky / oleje.

KAPITOLA 1 UVÍTÁNÍ

1-1 Úvod

Epilaser EP-720-10 je laser pro trvalé snížení počtu chloupků, který vám na rozdíl od dočasných řešení, jako je holení a voskování, poskytuje dlouhotrvající výsledky z pohodlí vašeho domova. Zařízení Epilaser funguje stejným způsobem jako profesionální laser na snížení počtu chloupků, tedy vysílá impuls laserového světla, které zahřívá tmavý pigment uvnitř chloupku a deaktivuje folikul produkující chloupky, což vám po sérii použití zajistí trvalé snížení počtu chloupků. Je určen pro použití na středně až tmavých odstínech pokožky s různými přirozenými barvami chloupků. Kromě toho vestavěná kamera umožňuje, aby zařízení Epilaser automaticky vyhledalo a ošetřilo všechny chloupky v ošetřované oblasti během několika sekund. Jeho použití je snadné, stačí podržet zařízení Epilaser na místě a po dokončení přejít do další oblasti.

Kde laser používat?

Zařízení Epilaser lze používat na následujících částech těla: Obličejové chloupky (na tvářích žen a pod nimi, jako je brada a čelist), paže, podpaží, ruce, nohy, chodidla, linie bikin a záda.




Výstraha: Použití zařízení Epilaser není bezpečné na následujících částech těla: Oblast očí (oči, obočí a řasy), čelo, uši, bradavky, genitálie a řitní otvor.

POZNÁMKA: Zařízení Epilaser funguje nejlépe na malých oblastech růstu chloupků (např. na obličejí). Jestliže se používá na větší oblast (např. nohy, pupík), je doba ošetření delší.

1-2 CHARAKTERISTIKY

1. Trvalé výsledky: Trvalé odstranění chloupků a hladká pokožka.
2. Snadné použití: Zařízení Epilaser se používá prostým přiložením na pokožku.
3. Bezpečné a účinné: Využívá profesionální laserovou technologii, která s každým impulzem dodává ideální množství světla pro bezpečné a efektivní použití.
4. Nejrychlejší ošetření: Zařízení Epilaser dokáže ošetřit obě nohy během několika minut na nejnižší energetické úrovni.
5. Prakticky bezbolestné: Zařízení Epilaser poskytuje jemné a prakticky bezbolestné ošetření.
6. Pohodlné: Nemusíte se objednávat a ošetříte svou pokožku v pohodlí a soukromí vašeho domova.
7. Šetří peníze: Ve srovnání s náklady na laserové odstranění chloupků na klinice se zařízení Epilaser skutečně vyplatí.

1-3 OBSAH BALENÍ

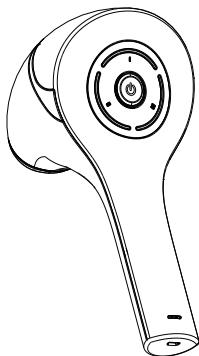

Zařízení
EPILASER




Kabel USB



Uživatelská
příručka

KAPITOLA 2: Základní informace

2-1 Tlačítka a součásti

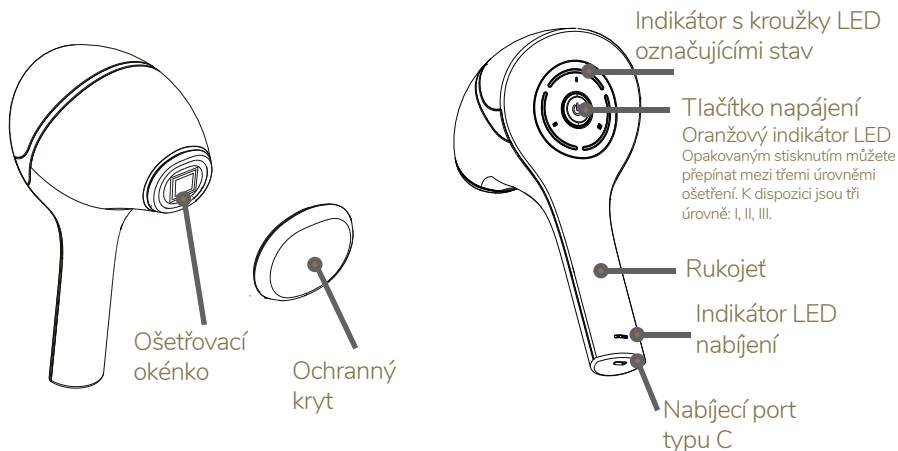


2-2 Nabíjení zařízení Epilaser



Poznámky


- Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí port čistý a suchý.
- Ujistěte se, že používáte dodaný nabíjecí kabel typu C.

Za účelem nabíjení zařízení Epilaser připojte jeden konec přiloženého nabíjecího kabelu k nabíjecímu portu zařízení Epilaser a druhý konec kabelu ke zdroji napájení s USB. Když se zařízení Epilaser nabíjí, indikátor LED nabíjení svítí červeně.

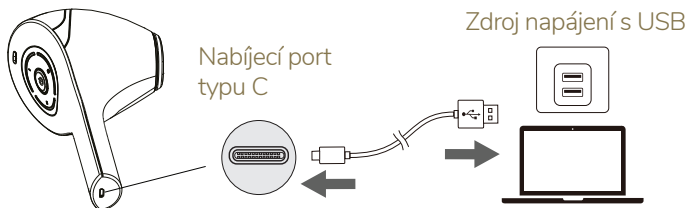

NABÍJENÍ	● Stálá červená
PLNĚ NABITO	● Stálá zelená

Poznámka: Nabíjejte zařízení Epilaser za použití jakéhokoli standardního zdroje napájení s USB (5 V / 1 A až 5 V / 2 A).

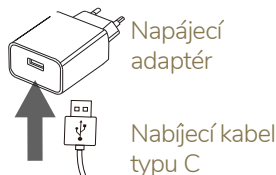


Připojte koncovku USB přiloženého nabíjecího kabelu typu C k napájecímu adaptéru 5 V / 1 A, čímž vytvoříte nabíječku. Poté připojte nabíječku k nabíjecímu portu zařízení Epilaser a do elektrické zásuvky ve zdi.


- Úplné nabití zařízení Epilaser trvá asi 3 hodiny.
- Jakmile je zařízení Epilaser plně nabito, odpojte nabíječku od zařízení Epilaser a síťové zásuvky.
- Pokud máte v úmyslu nepoužívat své zařízení Epilaser dlouhou dobu, doporučujeme vám dobít ho každé 3 měsíce, abyste udrželi zachovali baterie.

2-3 Zapnutí/vypnutí

- 1 Odstraňte ochranný kryt ze zařízení Epilaser.

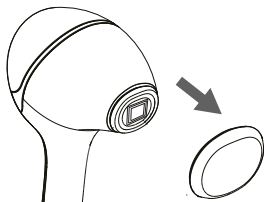


- 2 Zapněte zařízení Epilaser stisknutím tlačítka napájení.

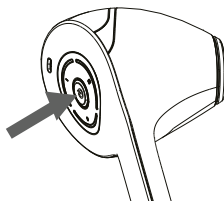

ZAP.	● Stálá zelená (kroužek LED)
	🔊 Tón vypnutí

- 3 Chcete-li zařízení po ošetření vypnout, podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu 3 sekund.

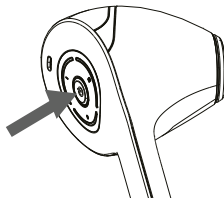

VYP.	Vypnuto (kroužek LED)
	🔊 Tón vypnutí

KAPITOLA 3: Příprava

3-1 Příprava



Při přípravě ošetření postupujte podle těchto pokynů.

1. Nepodstupujte peeling pokožky nebo jiný postup pro obnovení jejího povrchu šest týdnů nebo méně před prvním ošetřením.
2. Zesvětlete svou pokožku: vyhněte se jakýmkoliv samoopalovacím krémům, které ztmavují pokožku.
3. Nepoužívejte jiné metody odstraňování chloupků. Vytrhávání, voskování a elektrolýza mohou narušit folikul chloupku a je třeba se jim vyhnout alespoň čtyři týdny před ošetřením

3-1-1. Zkontrolujte odstín vaší pokožky a přirozenou barvu vašich chloupků

Přidatle ošetřovanou oblast (oblasti) k odpovídajícímu odstínu pokožky a barvě chloupků dle informací níže, abyste zjistili, zda je pro váš použití zařízení Epilaser vhodné. Zařízení Epilaser je určeno pouze pro použití na odstínech pokožky od typu I (bílá) po typ IV (světle hnědá).

- Zkontrolujte odstín své pokožky

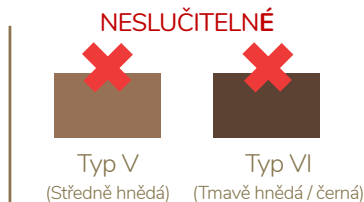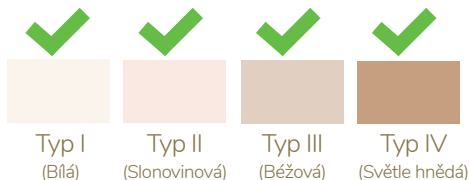

Výstraha:

NEPOUŽÍVEJTE zařízení na odstíny pokožky typu V (středně hnědá) nebo typu VI (tmavě hnědá / černá) (viz tabulka). Tmavší pokožka může absorbovat příliš mnoho laserového světla, což může pokožku popálit.


Zkontrolujte přirozenou barvu svých chloupků.



Slučitelné barvy chloupků



Neslučitelné barvy chloupků

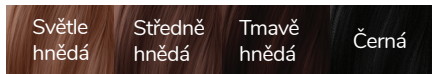


3-1-2 Připravte svou pokožku

Krok 1 Zastříhování a holení

Chloupky musí být v době laserového ošetření viditelné, přibližně 1–2 mm. Holení – doporučuje se neholit minimálně pět dní před ošetřením. Před laserovým ošetřením nevoskujte.

Zastříhování lze provést těsně před laserovým ošetřením. Nechte vlasový stvol pod povrchem neporušený. Chloupky musí být v době ošetření viditelné (krátké jako strniště až do 2 mm (0,08 palce)). Neošetřujte chloupek delší než 2 mm (0,08 palce). Jakýkoli příliš dlouhý nebo hustý chloupek se spálí.

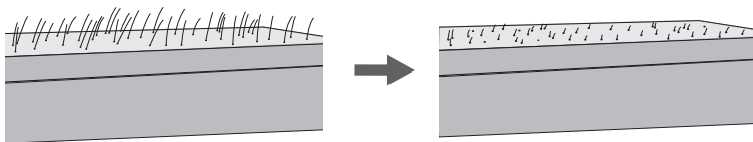

Krok 2 Očistěte oblast ošetření.

Odstraňte veškerou kosmetiku, pleťové vody a krémy, které mohou blokovat laserové světlo. Laser je nejlépe použít po sprše nebo koupeli, abyste si byli jisti, že pokožka je čistá.

Krok 3 Osušte oblast ošetření.

3-1-3 Test bodů

1. Připravte pokožku.
2. Zapněte zařízení Epilaser.
3. Před aplikací postupujte podle pokynů v části „Ošetření chloupků“ na stranách 14–15 při **ošetření vnitřní části paže**.
4. Přemístěte laser na další ošetřovanou oblast a proveďte test pro druhé ošetření.
5. Otestujte až 3 oblasti.
6. Počkejte 24 hodin a prozkoumejte testovaná místa. Pokud se neobjeví žádné vážné nepohodlí nebo vedlejší účinky na pokožce, test byl vyhovující a můžete začít s ošetřováním chloupků. Jestliže si nejste jisti výsledkem testu, zařízení Epilaser nepoužijte a před dalším používáním kontaktujte zákaznickou podporu Epilady 2000 LLC.

3-2 Ošetření vašich chloupků

Ujistěte se, že ošetřovací okénko je čisté a suché.

Krok 1

1. Odstraňte ochranný kryt ze zařízení Epilaser a zapněte jej.
2. Když je zařízení Epilaser zapnuto, ve výchozím nastavení se nastaví na nízkou úroveň ošetření (úroveň 1) a jeden kroužek LED pak bude svítit zeleně. Nastavte úroveň ošetření od jedné do tří (I–III).
3. Opakovaným stisknutím tlačítka napájení vyberte požadovanou úroveň ošetření. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme používat zařízení Epilaser nejprve na vysoké úrovni (úroveň 3).

Nízká úroveň ošetření (Úroveň 1)	● Stálá zelená (1 kroužek LED)
Střední úroveň ošetření (Úroveň 2)	● Stálá zelená (2 kroužky LED)
Vysoká úroveň ošetření (Úroveň 3)	● Stálá zelená (3 kroužky LED)

Když je úroveň ošetření nastavena, zařízení je připraveno k použití.

POZNÁMKA: Pokud se zařízení Epilaser 3 minuty nepoužívá, automaticky se vypne.


Krok 2 Zaměření a ošetření chloupků

Přitiskněte ošetřovací okénko na pokožku v oblasti, kterou chcete ošetřit. Vestavěná kamera identifikuje a zaměří folikuly chloupků a lasery ošetří každý chloupek, který je identifikován v cílové oblasti. Když laser provádí ošetření, kroužek LED bude blikat zeleně.

Poté, co byly ošetřeny všechny chloupky v cílové oblasti, zazní zvukový signál, že můžete zařízení sejmut z pokožky a přejít k další oblasti ošetření.

Pokud zařízení Epilaser odstraníte příliš brzy, svítící kroužek LED bude blikat červeně a zazní zvukový signál, který znamená, že ošetření nebylo aplikováno.

Pokud to nastane, jednoduše opět umístěte zařízení, přidržte je na pokožce a nepohybujte s ním, dokud vás neupozorní, že dokončilo ošetření.

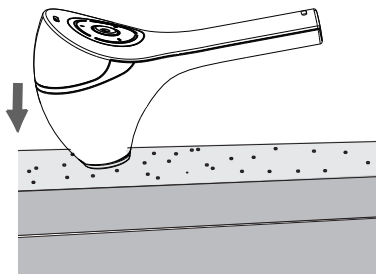

Chloupky jsou ošetřovány		Blikající zelená (kroužek LED)
Ošetření je dokončeno		Tón dokončení

Ošetření není prováděno		Blikající oranžová (kroužek LED)
		Tón selhání

PAMATUJTE při ošetření nechtěných chloupků na následující:

Zařízení Epilaser vyše v ošetřovacím okénku několik impulzů při ošetřování oblasti. Když dokončí ošetření, je nutné jej zvednout z pokožky a přemístit. Zařízení nevyše více než jednu sadu impulzů, dokud není z pokožky přemístěno.



Tipy pro ošetření

Správné používání zařízení Epilaser vyžaduje určitou praxi. Zpočátku může chvíli trvat, než se naučíte zařízení správně držet, aby se nezvedalo z pokožky. Pro větší stabilitu může být užitečné použít obě ruce nebo položit ruku na rovný povrch (ale není třeba silně tlačit na pokožku). Jakmile budete mít se zařízením Epilaser více zkušeností, ošetření bude snazší – a dokonce si užijete i trochu zábavy!

Pro správné umístění zařízení Epilaser na pokožku budete možná chtít použít zrcadlo. Sezení naproti zrcadlu vám umožní zaměřit se na požadovanou oblast ošetření před aplikací laseru na pokožku.

Krok 3 Přemístěte a opakujte pro další oblast.

Po ošetření jedné oblasti přesuňte a přemístěte ošetřovací okénko do jiné oblasti. Postupujte podle kroku 2 „Zaměření a ošetření chloupků“ (viz strana 12) pro každou oblast, kterou chcete ošetřit.

Krok 4 Vypněte zařízení.

Po dokončení ošetření vypněte zařízení Epilaser a po každém použití jej důkladně vyčistěte (viz část „Čištění zařízení Epilaser“ na straně 14). Umístěte ochranný kryt zpět na ošetřovací okénko. Vyčistěte ošetřenou oblast a abyste snížili nepříjemné pocity, můžete na ni nanést ochlazující gel.

Při použití podle návodu je zařízení Epilaser volně prodejné zařízení pro osobní použití, které poskytuje trvalé odstranění chloupků. Výsledky mohou být u každé osoby odlišné a závisejí na faktorech, jako je oblast těla, která je ošetřena, a jak přesně jsou dodržovány pokyny pro ošetření.



Důležité:

1. Pokud se maximální úroveň ukáže jako příliš citlivá pro ošetřovanou oblast, neváhejte ji snížit na úroveň 2 nebo dokonce 1.
2. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme používat Epilaser 2–3krát týdně po dobu 12 týdnů.

KAPITOLA 4: PO OŠETŘENÍ

4-1 Čištění zařízení Epilaser

Zařízení Epilaser byste měli udržovat čisté a suché, zejména ošetřovací skleněné okénko. Vypněte zařízení Epilaser, když je třeba jej vyčistit. Čistíte sklo ošetřovacího okénka zařízení vlhkým bavlněným tamponem. Doporučuje se také pravidelně čistit prach z mezer.

- Dávejte pozor, abyste nepoškodili vnitřek nebo okolní oblast ošetřovacího okénka.

Poznámka: Při čištění zařízení **NENAMÁČEJTE**, mohlo by dojít k usmrcení nebo úrazu elektrickým proudem.

4-2 Tipy pro uživatele

Pocity nebo vjemy po ošetření se liší v závislosti na osobě a oblasti ošetření. Možná necítíte nic nebo můžete zažít pocit tepla, píchání. U některých uživatelů se může objevit mírné zarudnutí, které obvykle zmizí během 24 hodin.

Po celou dobu léčby se vyhněte působení zdrojů umělého světla, jako jsou opalovací kabiny nebo solária.

Po dobu 24 hodin po ošetření se vyhněte jakékoli aktivitě nebo přípravkům, které mohou vaši pokožku dráždit. To zahrnuje používání vířivek nebo saun, nošení přílišného oblečení, používání bělicích krémů, parfémovaných produktů nebo peelin-
gových přípravků. Výše uvedené mohou v ošetřených oblastech způsobit podráždění, jako je svědění a zarudnutí.

Během ošetření

Po prvním ošetření nenastane na chloupkách žádná viditelná změna. Laserové odstranění nezpůsobí okamžité vypadnutí chloupků. Ošetřené chloupky nakonec samy vypadnou. Můžete pokračovat v běžné rutině odstraňování chloupků (např. epilace, voskování, holení), pokud si to přejete.

Během dalších ošetřeních dojde k postupnému snižování počtu chloupků. Chloupky, které znovu vyrostou, se také začnou zesvětlovat a budou jemnější.

Po dokončení ošetření

Chloupky z folikul, které byly deaktivovány zařízením Epilaser, už znovu nerostou. V případě potřeby proveďte příležitostné opravy nebo dodatečné ošetření.

POZNÁMKA: Laserové ošetření chloupků ošetřené chloupky okamžitě neodstraní. Zamýšleným výsledkem je, že vlasové folikuly budou po ošetření deaktivovány a nevyrostou z nich nové chloupky.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém	Řešení
Zařízení Epilaser se nezapne.	Zkontrolujte, zda baterie v zařízení Epilaser není vybitá, pokud ano, nabijte ji.
Když nabím zařízení Epilaser, LED indikátor nabíjení se nerozsvítí.	Zkontrolujte, zda je zařízení Epilaser správně připojeno. Ujistěte se, že používáte nabíjecí kabel typu C dodaný se sadou zařízení Epilaser a že je nabíjecí kabel připojen k funkčnímu zdroji s USB. Vyměňte nabíječku a pokuste se zařízení znovu nabít.
Zařízení Epilaser fungovalo správně, ale pak přestalo fungovat.	Zkontrolujte, zda baterie v zařízení Epilaser není vybitá, pokud ano, nabijte ji.
Vše bylo provedeno správně, ale zařízení Epilaser nefunguje.	Zkontrolujte následující: 1. Zkontrolujte, zda byl laser zapnut. Pokud tomu tak není, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka. 2. Zkontrolujte, zda je ošetřovací okénko v plném kontaktu s pokožkou. 3. Zkontrolujte, zda je ošetřovací okénko čisté. Pokud tomu tak není, vyčistěte jej, jak je popsáno na straně 17.

Specifikace

Název / č. modelu	Epilaser/EP-720-10
Laserový zdroj	Diodový laser
Vlnová délka laseru	808 +/- 20 % nm
Velikost laserového paprsku	1 mm ²
Plynulost	25-50-75 J/cm ²
Trvání impulzu	0,1–0,2 s
Ošetřená oblast	18 mm x 14 mm
Čidlo	4x čidlo pokožky
Bezpečnostní systém	4 čidla pokožky + hardwarová omezení + jednotka softwarového zpracování (ARM cortex M7 arc)
Nabíjecí port	Port typu C
Příkon (nabíjení)	5 V / 1 A
Typ baterie	Dobíjecí lithium-iontová baterie 3,7 V 2600 mA
Doba nabíjení	Až 3 hodiny
Hmotnost	390 g / 13,75 oz



EPILASER^{od EPILADY}

Č. 808

Model EP-720-10

+

+

+

+